


Meðferðarfrelsi

Innrennslissett
með stálnál eða
mjúkri holnál

neria™ Innrennslissett

Fyrir einfalda og örugga meðhöndlun við innrennslismeðferð undir húð

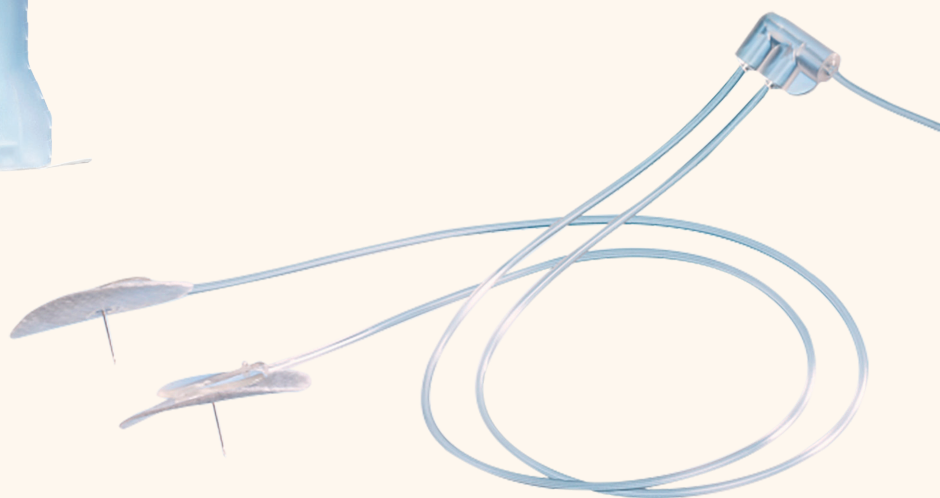

GÓÐ VIÐLOÐUN

Innbyggður húðvænn bæklingur¹
með skoðunarglugga yfir innsetningarstað.

TVÖFALD SLÍPAÐAR NÁLAR

Fyrir mjúkar inndælingar.²

TVÖFÖLD SLÖNGULÖG

Kemur einnig í veg fyrir beyglur á slöngunni
og tryggir stöðugt innrennslisflæði.

LÍTID FYLLINGARRÚMMÁL

Lágmarks lyfjasóun.³

VENJULEGT LUER-TENGI

Passar á allar venjulegar sprautur.

neria™ Innrennslisett með stálnál

neria™ innrennslisett er latexlaust og inniheldur ekki þalöt eða PVC. Framleitt úr pólýetýlen.

neria™ singel með 90° stálhylki, 27 G

- Gripvænir vængir til að auðvelda meðhöndlun.
- Fáanlegt í fjórum mismunandi náladýptum.
- Stöðugleikaprófað og samþykkt fyrir immúnóglóbúlín, deferoxamín, morfín og apómorfín.
- Heill innrennslisett, ekki skiptanlegt.

Nafn	Fjöldi/frp	Vörunúmer
neria™ singel innrennslisett 6 mm stálnál, 60 cm slöngusett	10 stk	202990
neria™ singel innrennslisett 8 mm stálnál, 60 cm slöngusett	10 stk	912273
neria™ singel innrennslisett 8 mm stálnál, 80 cm slöngusett	10 stk	202992
neria™ stakt innrennslisett 10 mm stálhylki, 80 cm slöngusett	10 stk	202995
neria™ stakt innrennslisett 12 mm stálhylki, 80 cm slöngusett	10 stk	734840



neria™ stakt


Ábending og notkunartími:

Apómorfín:	12 tímar
Deferoxamín:	18 tímar
Immúnóglóbúlín:	12 tímar
Morfín:	48 klukkustundir

neria™ multi 90° stálnál, 27 G

- Gripvænir vængir til að auðvelda meðhöndlun.
- Fáanlegt í þremur mismunandi náladýptum.
- neria™ multi er stöðugleika prófað og samþykkt.
- Dreifir immúnóglóbúlíni í tvo til fjóra arma fyrir inndælingu undirhúð.

Nafn	Fjöldi/frp	Vörunúmer
neria™ multi 2-arma innrennslisett 2 st 8 mm stálnál, 90 cm slöngusett	10 stk	734640
neria™ multi 2-arma innrennslisett 2 st 10 mm stálhylki, 90 cm slöngusett	10 stk	732760
neria™ multi 3-arma innrennslisett 3 st 8 mm stálhylki, 90 cm slöngusett	10 stk	734641
neria™ multi 3-arma innrennslisett 3 st 10 mm stálnál, 90 cm slöngusett	10 stk	732761
neria™ multi 3-arma innrennslisett 3 st 12 mm stálnál, 90 cm slöngusett	10 stk	734642
neria™ multi 4-arma innrennslisett 4 st 10 mm stálnál, 90 cm slöngusett	10 stk	732762
neria™ multi 4-arma innrennslisett 4 st 12 mm stálnál, 90 cm slöngusett	10 stk	734643

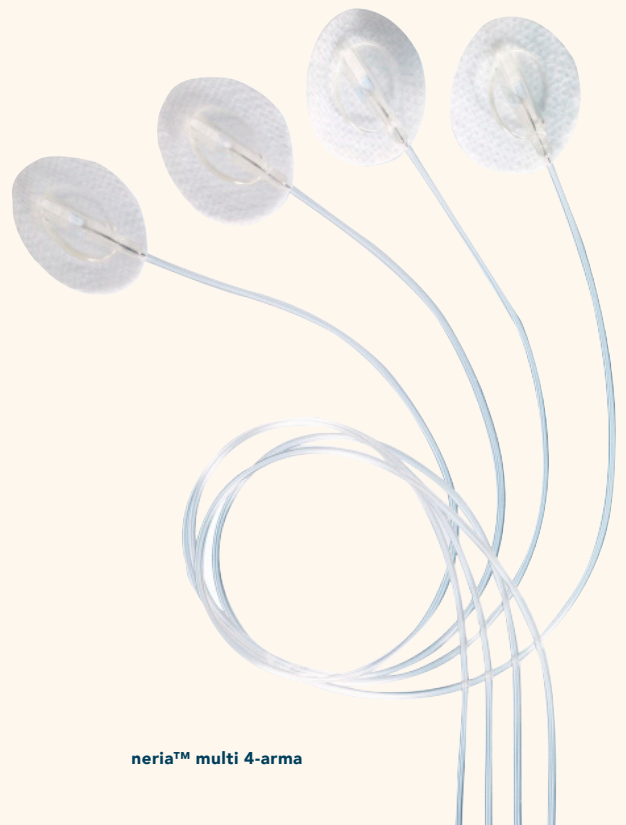

neria™ multi 4-arma

Ábending og notkunartími:

Immúnóglóbúlín: 12 klukkustundir

neria™ innrennslissett með mjúkri holnál

Hér pantar þú:
order@infucare.se

neria™ guard 90° innsetningarhorn með mjúkri kanúlu og fullsjálfvirku innskoti

- Með því að ýta á hnapp er neria™ guard sett á í undirhúð. Fáanlegt í tveimur mismunandi náladýptum.
- neria™ guard er gott fyrir þá sem eru hræddir við stungur. Nálin sést ekki fyrir, meðan á og eftir ísetningu.
- Skiptanlegt. Hagnýtt þegar farið er í það eða sturtu.
- Lágmarkar hættu á stungum. Samræmist reglugerð ESB vernd gegn áverkum af völdum oddhvassra áhalda.⁴
- Stöðugleiki prófaður og samþykktur fyrir immúnóglóbúlín, morfín og apómorfín.

Nafn	Fjöldi/frp	Vörunúmer
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 6 mm mjúk teflon holnál, 12 cm slöngusett	10 stk	738676
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 9 mm mjúk teflon holnál, 12 cm slöngusett	10 stk	738740
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 6 mm mjúk teflon holnál, 30 cm slöngusett	10 stk	912268
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 9 mm mjúk teflon holnál, 30 cm slöngusett	10 stk	912269
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 6 mm mjúk teflon holnál, 60 cm slöngusett	10 stk	738140
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 9 mm mjúk teflon holnál, 60 cm slöngusett	10 stk	738141
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 6 mm mjúk teflon holnál, 80 cm slöngusett	10 stk	738142
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 9 mm mjúk teflon holnál, 80 cm slöngusett	10 stk	738143
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 6 mm mjúk teflon holnál, 110 cm slöngusett	10 stk	912270
neria™ guard samþætt innlegg Innrennslissett 9 mm mjúk teflon holnál, 110 cm slöngusett	10 stk	912271



neria™ guard

Ábending og notkunartími:

Apómorfín	12 klst
Immúnóglóbúlín	12 klst
Morfín	72 klst

neria™ soft með 20-45° innsetningarhorni deilanlegt innrennslissett með mjúkri holnál

- neria™ soft beitt með gripi sem auðvelt er að grípa með með odd á innsetningarnálinni. Hentar einnig fólki sem hefur litla fitu undir húð.
- Fáanlegt í tveimur mismunandi náladýptum.
- Hægt að nota í líknandi meðferð við verkjum.⁵
- Stöðugleikaprófaða og samþykkt fyrir immúnóglóbúlín, morfín og apómorfín.

Nafn	Fjöldi/frp	Vörunúmer
neria™ soft innrennslissett 13 mm mjúk holnál, 30 cm slöngusett	10 stk	204512
neria™ soft innrennslissett 13 mm mjúk holnál, 60 cm slöngusett	10 stk	202975
neria™ soft innrennslissett 13 mm mjúk holnál, 80 cm slöngusett	10 stk	202976
neria™ soft innrennslissett 13 mm mjúk holnál, 110 cm slöngusett	10 stk	202977
neria™ soft innrennslissett 17 mm mjúk holnál, 60 cm slöngusett	10 stk	203450



neria™ soft

Ábending og notkunartími:

Apómorfín	12 klst
Immúnóglóbúlín	12 klst
Morfín	72 klst

Hægt er að ávísa
og sækja vöruna í
apótek

NERIA™ INNRENNSLISSETT eru þróuð fyrir lyfjagjöf undir húð. Hægt er að nota þau bæði í innrennslis- og inndælingarmedferð. Neria innrennslissett eru notendavæn og fánleg í nokkrum útfærslum, með mjúkri holnál, stálnáum og 1-4 örmum og innbyggðum húðvænum plástri.¹

Neria innrennslissettið er með slöngufestingu með venjulegri luer-tengingu. Innrennslissettið er tengt við sprautu fyrir færanlega innrennslisdælu eða notað til inndælingar með hléum.

Innrennslissettið er afhent í 10 pakkningum.

Tæknilýsing neria™ innrennslissett

INNRENNSLISSETT	HOLNÁL	INNSET- NINGARHORN	HOLNÁLSDÝPT	STÆRÐ INNSETNINGAR- NÁLAR	LENGD SLÖNGUNNAR	FYLLINGARRÚMMÁL	ÚRTAKA
NERIA™ STAKT	Stál, tvöföld slípun.	90°	6, 8, 10 og 12 mm	27 G	6 mm: 60 cm 8 - 12 mm: 80 cm	60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml	Nei
NERIA™ MULTI	Stál, tvöföld slípun.	90°	8, 10 og 12 mm	27 G	90 cm (60+30)	2 - 0.36 ml 3 - 0.43 ml 4 - 0.51 ml	Nei
NERIA™ GUARD	Mjúk (samsvarandi 23G innra þvermál)	90°	6 mm og 9 mm	27 G	12, 30, 60, 80 og 110 cm	12 cm - 0,04 ml 30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml	Já, á innset- ningarstaðnum
NERIA™ SOFT	Mjúk (samsvarandi 23G innra þvermál)	20-45°	13 mm og 17 mm	27 G	30, 60, 80 og 110 cm	30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml	Já, á innset- ningarstaðnum

SVÍÐJÓÐ: Box 140 26 • 167 14 BROMMA • +46 8 601 24 40 • info@infucare.se
DANMÖRK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk
FINNLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NOREGUR: Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no

FRAMLEIÐANDI Á NERIA™ :

Unomedical A/S – A Convatec Company, Aaholmvej 1-3,
Osted, 4320 Lejre, DENMARK

neria is a trademark of Unomedical A/S.

inordic
INFUCARE

Dreifingaraðili • www.infucare.com

Heimildir: 1. Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s. 2. Parsons J. Infusion line preference of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing. December 2009. Vol 5 No 12. 3. Chan.G.C.F., Ng D.D.M.W.et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion - Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-over Assessment Model. Am.J. Hematol, 76;398-4044. 4. Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector. 5. Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: the neria TM soft infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2012, vol 18, No 11.